

Borreliose einfach testen – denn Zeit ist kostbar



Sichere, objektive und automatisierte Testergebnisse **in nur 3 Minuten** möglich*



Integriertes Daten Management System zur Speicherung der Test- und Benutzerhistorie



Hervorragende Spezifität und Sensitivität im Vergleich zum Stufenalgorithmus aus ELISA und Western-Blot



Erfassung der Benutzer- und Patienten-ID durch den **integrierten Barcode Scanner**



Zwei wählbare Test-Modi (WALK AWAY und READ NOW) für eine flexible Testauswertung


Sofia 2 mit Advance Result Technology
Sichere, objektive und automatisierte Ergebnisse in nur 3 Minuten möglich!

ART \geq
Advance Result Technology




Sofia 2 Lyme+ FIA – Testverfahren

Serum/Plasma

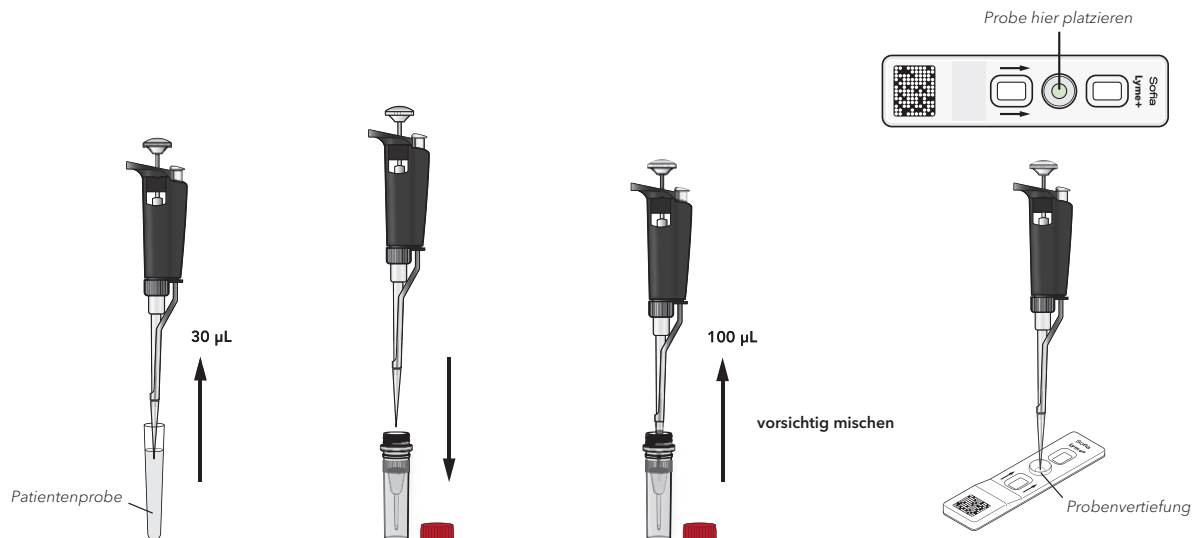


Sofia 2 Test-Modi

WALK AWAY Modus –
Messung starten, nicht lange warten

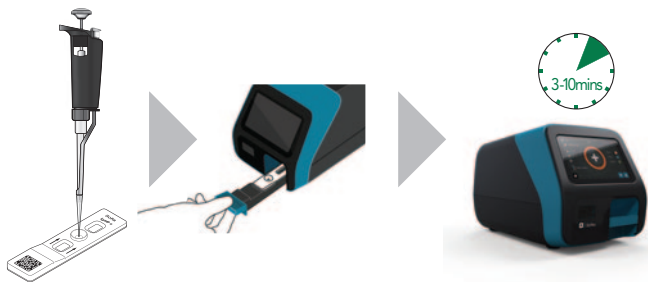

READ NOW Modus –
Hoher Durchsatz dank Batch Verfahren

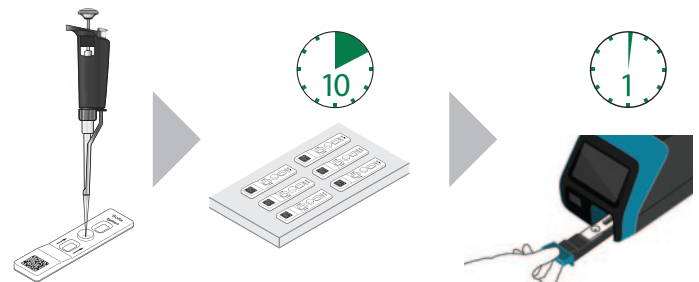

Sofia 2 Lyme+ FIA

- Differenzierung von IgM- und IgG-Antikörpern in nur einem Test
- Erkennung von *Borrelia burgdorferi*, *Borrelia afzelii*, der *Borrelia garinii*
- Eindeutige und sichere Ergebnisse durch die automatisierte Auswertung der Messergebnisse
- Lagerung bei Raumtemperatur
- 24 Monate Haltbarkeit ab Herstellungsdatum

Methodenvergleich mit ELISA und Western Blot*

Ergebnis Typ	IgM	IgG
Sensitivität	92,3 %	96,4 %
Spezifität	90,1 %	95,2 %

*Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage.

Sofia 2 Lyme+ FIA – 25 Test Kit: Art.-Nr. 20309



Quidel Germany GmbH
Leibnizstr. 11
70806 Kornwestheim



+49 7154 1593912



+43 316 23123



0800 554864

emeacustomerservice@quidel.com