



Sofia®
SARS Antigen FIA



SARS-CoV-2 einfach testen- denn Zeit ist kostbar



Sichere, objektive und automatisierte Testergebnisse **in 15 Minuten**



Integriertes Daten Management System zur Speicherung der Test- und Benutzerhistorie



Hervorragende klinische Leistung im Vergleich zu molekularen Testverfahren



Erfassung der Benutzer- und Patienten-ID durch den **integrierten Barcode Scanner**




Zwei wählbare Test-Modi (WALK AWAY und READ NOW) für **eine flexible Testauswertung**



Sofia SARS Antigen FIA – Testverfahren


Nasen-/Nasenrachenabstrich Testverfahren

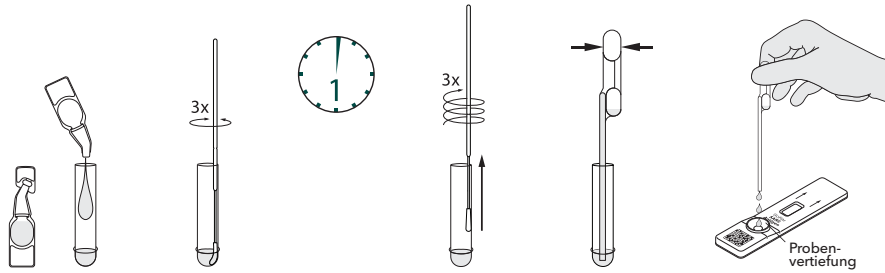

Sofia Test-Modi

WALK AWAY Modus – Messung starten

READ NOW Modus – Hoher Durchsatz dank Batch Verfahren

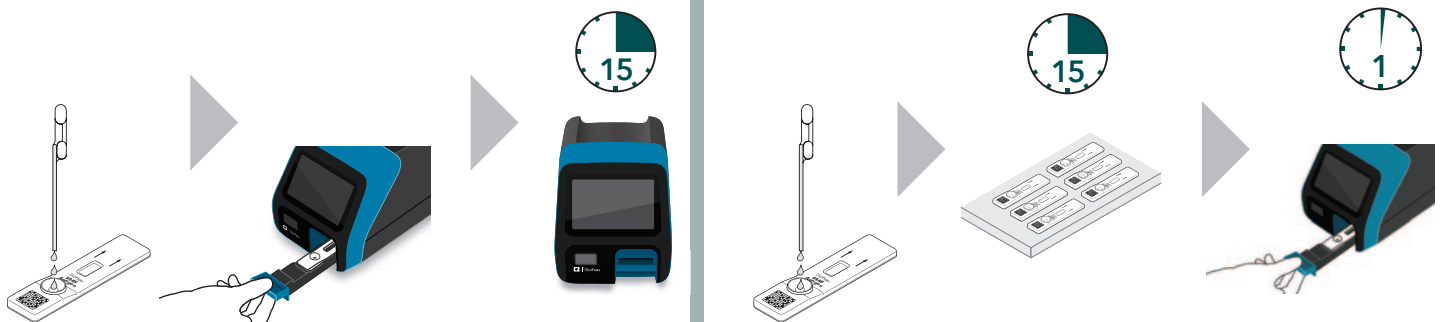

Sofia SARS Antigen FIA*

- Geeignet für Nasen- und Nasenrachenproben
- Akkurater Nachweis aus direkter Probe
- Testergebnis in 15 Minuten
- Testkit enthält 25 sterile Nasentupfer sowie positive und negative Kontrolltupfer
- Lagerung bei Raumtemperatur

*Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte der Packungsbeilage

Sofia SARS Antigen FIA – klinische Leistung

	Referenz-PCR mit vorheriger Extraktion				95% KI			
		POS	NEG	Gesamt	PPA	96.7%	83.3%	99.4%
Sofia SARS Antigen FIA	POS	29	0	29	NPA	100,0 %	97,9 %	100,0 %
	NEG	1	179	180	PPV	100,0 %	88,3 %	100,0 %
	Gesamt	30	179	209	NPV	99,4 %	96,9 %	99,9 %
					Prävalenz	14,4 %	7,4 %	14,3 %
					%-Übereinstimmung	99,5 %		



Sofia SARS Antigen FIA – 25 Test Kit. Artikelnr. : 20378



Quidel Germany GmbH
Leibnizstr. 11
70806 Kornwestheim



+49 7154 1593912



+43 316 231239



0800 554864

emeacustomerservice@quidel.com